


bloomea®

PARIS



NeoCare

SKIN EXPERT

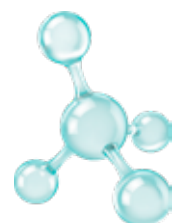

WENN SICH IHRE EXPERTISE UND DIE ENERGIE VON NEOCARE VERBINDEN

Wir haben die Lösung: Dank der Tecar-Esthétique, revolutioniert **Bloomea** die Hochfrequenzbehandlung.

Diese Technologie der neuesten Generation ist das Ergebnis eines französischen Co-Brandings zwischen dem Marktführer für hochfrequente Ströme mit therapeutischem Anwendungszweck und **Bloomea**, dem Experten für Hautpflege.

Das **NeoCare** Gerät erfüllt die Erwartungen einer sehr anspruchsvollen männlichen und weiblichen Kundschaft, indem es Effizienz und Komfort in einer Behandlung vereint.

IHRE EXPERTISE



STIMULIERT DIE **NATÜRLICHEN** MECHANISMEN IHRES KÖRPERS

NeoCare verwendet Hochfrequenzströme zwischen 300 und 1000 KHz, mit denen zwei Zelltypen behandelt werden können : **Fibroblasten**, die Zellen für jugendliche Haut, und **Adipozyten**, die Fett speichernden Zellen.



UNSERE
ENERGIE

①

**DER HAUTALTERUNG
ENTGEGENWIRKEN**

②

**MODELLIERT DIE
KONTUREN UND
MILDERT CELLULITE**




BIOLOGISCHE WIRKUNG ZUR REGENERATION

Diese Wirkung zielt auf den Wiederaufbau Ihrer Gewebe wie zum Beispiel Ihrer Dermis ab. **BIONEQ** kurbelt den intra- und extrazellulären Austausch der Hautschichten an, wodurch die Haut fester und elastischer wird. Feine Linien verblassen und Ihre Haut erstrahlt wieder in natürlichem Glanz.

THERMISCHE WIRKUNG ZUR BELEBUNG

Die komplementäre Wirkung von **THERMONEQ** schleust die Wirkstoffe (Nährstoffe, Sauerstoff usw.), die auf den Behandlungsbereich gerichtet sind, in die tieferen Hautschichten. Die Stoffwechselfähigkeit des jeweiligen Areals ermöglicht einen schnellen Verbrauch der Wirkstoffe sowie deren Ausscheidung. Aber das ist noch nicht alles. Durch das Anregen von Blut- und Lymphkreislauf des behandelten Bereichs, werden Schlackenstoffe schneller abgebaut.

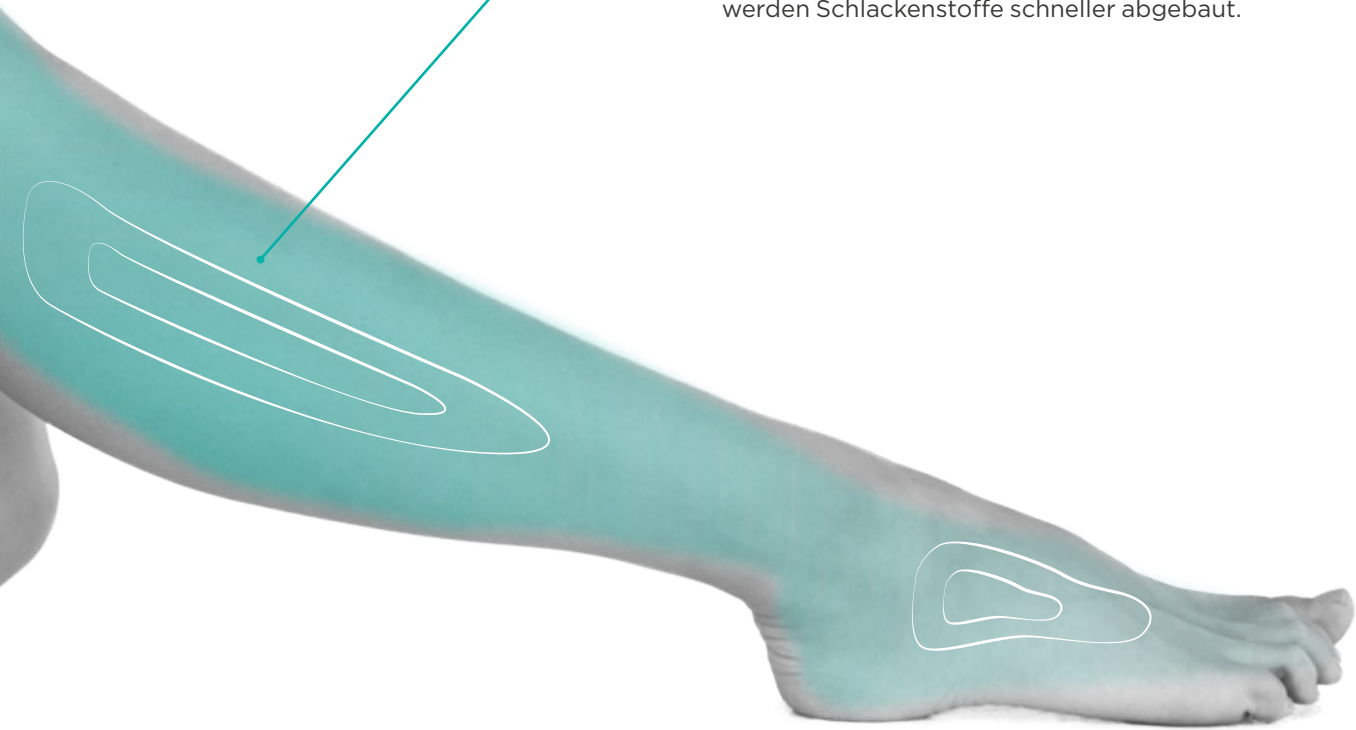

NEO : BIO EXPRESS-FIGURSTRAFFUNG



KÖRPER

- HAUT VERDICHTEN
- ARME STRAFFEN
- CELLULITE MILDERN
- KONTUREN MODELLIEREN
- FLÜSSIGKEITSSTAU ELIMINIEREN
- DIE 3 ARTEN VON CELLULITE BEHANDELN





FASERIGE CELLULITE

Sie ist die hartnäckigste, da schon lange vorhanden. Fühlt sich hart und schmerzhaft an.



ADIPÖSE CELLULITE

Sie ist häufig mit Übergewicht verbunden. Weich beim Hineinkneifen und tut nicht weh. Vor allem an Bauch, Oberschenkel und Gesäß.



WÄSSRIGE CELLULITE

Sie ist häufig auf eine schlechte venöse und lymphatische Zirkulation und Wassereinlagerungen zurückzuführen.



NEO : BIO EXPRESS-VERJÜNGUNG



GESICHT & DEKOLLETÉ

- **DAS HAUTBILD VERJÜNGEN**
- **DRAINAGE UND AUSSTRAHLUNG VERBESSERN**
- **FLÜSSIGKEITSSTAU ELIMINIEREN**
(Schwellungen unter den Augen)
- **FALTEN UND UNREGELMÄßIGKEITEN MILDERN**
(Aknenarben)
- **GESICHTSKONTUREN STRAFFEN**
- **DOPPELKINN REDUZIEREN**
- **DAS DEKOLLETÉ GLÄTTEN**
- **DIE 3 ARTEN VON HAUTALTERUNG BEHANDELN**



KNOCHENSCHWUND

Hohle Wangen / Tiefe Stirnfalten
/ Faltige Augenkontur /
Eingesunkene Augen /
Lippenfältchen



FETTPOLSTER

Doppelkinn / Schwammige
Gesichtskonturen und runde
Wangen / Gewichtszunahme



ELASTIZITÄTSVERLUST

Hängende Augenlider / Erschlaffte
Wangen / Ausgeprägte Naso-
Labial-Falten / Hängebäckchen /
Erschlafftes Gesichtsoval



HÄUFIGKEITSPRINZIP

Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass das Frequenzband zwischen 300 und 1200 kHz eine Zunahme des intra- und extrazellulären Austauschs und einen diathermischen Effekt auf die lebenden Gewebe induziert.


- **Monopolarer Strom :**

Der Strom fließt zwischen zwei Elektroden. Eine mobile Elektrode (das Handstück), die von der Kosmetikerin gehalten wird, und eine feste Elektrode, die im Allgemeinen an der Rückseite angebracht ist.

- **Multipolarer Strom :**

Der Strom fließt zwischen den kleinen Elektroden am Handstück.

Ihr **NeoCare** Gerät ist mit 4 Elektrodentypen ausgestattet, die unterschiedliche Wirtktiefen ermöglichen :

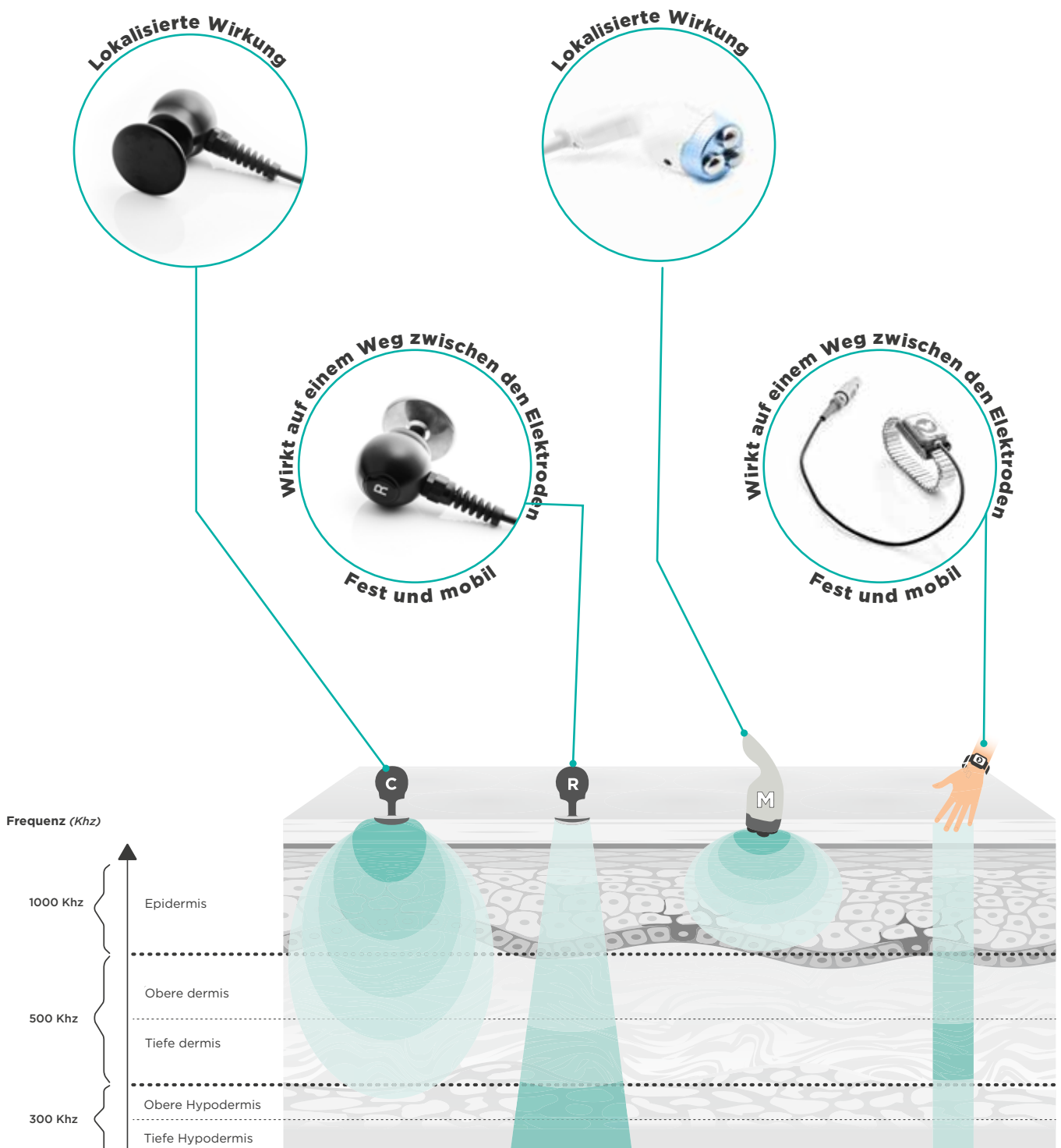

INNOVATION *NEOCARE* : IHR MANUELLES KNOW-HOW IM DIENST DER TECHNOLOGIE.

Dank eines Armbandsystems vereint NeoCare manuelle Praxis und fortschrittliche Technologie, um die Energie von Neo über einen nicht-invasiven, für den menschlichen Körper 100% natürlichen Strom in die tiefe Dermis zu bringen.

Damit können die empfindlichsten Bereiche behandelt und die Haut nach Ihren Wünschen "modelliert" werden, um Elastizitätsverlust zu bekämpfen und die Silhouette zu straffen.



NÜTZLICHE FUNKTIONEN

Um eine Gewöhnung der Zellen an die Behandlung zu vermeiden, verfügt das NeoCare Gerät über drei Funktionen für optimale und dauerhafte Ergebnisse :



DYNAMIC

Automatisches Scannen der Frequenzen zwischen der oberflächlichen und der tiefen Weichteilschicht. Mehrschichtige Spannungsentlastung und gleichzeitige Gefäßentlastung.



CET



LOW PULSE

Sanfte Behandlung von entzündlichen Bereichen / Beschleunigung der Drainagetechniken im Bereich der Lymphknoten / Rasche Beruhigung der behandelten Zonen.



DEEP CET



SUPER PULSE

Gepulster Intensitätsspeak, der es ermöglicht, bei Hyperthermie zu arbeiten und gleichzeitig das damit verbundene Hitzegefühl zu mildern. Wird hauptsächlich für fibrotisches Narbengewebe verwendet, um schlecht durchblutete Bereiche anzuregen und die Kollagensynthese zu fördern.



RET



ARMBAND

SCHNELL

Die Resultate sind schon nach der 1. Behandlung sichtbar.

DAUERHAFT

Der gewünschte dauerhafte Effekt wird mit nur einer Sitzung monatlich erzielt.

KOMFORTABEL

Die Behandlung ist nicht invasiv und schmerzlos.

BEAUTY-PFLEGE

WELLNESS

NeoCare

Zusatzbehandlungen

NARBEN & DEHNUNGSTREIFEN

DRAINAGE

DETOX



PLUSPUNKT NEOCARE

NeoCare - Mehr Energie, weniger Gewicht

MERKMALE

Frequenz	300 KHz, 500 KHz & 1 MHz
Funktion	DYNAMIC - LOW PULSE - SUPER PULSE
Gewicht	19kg (Gerät + Wagen)
Maße	105x35x48 cm

ZUBEHÖR

NeoCare 1.0	MOBILE CET : 3 Elektroden <i>unterschiedlicher Größe für Fokus- oder Radialwirkung</i> MOBILE RET : 3 Elektroden <i>unterschiedlicher Größe für kleine und große Flächen</i> FIXE : Rücklaufplatte und 10 Klebeplatten MyNeo : Widerstandsarmband
NeoCare 4.0	MIX3 (Körper) - MIX3 (Gesicht)
NeoCare 5.0	2 Klebeplatten, 2 Armbänder, doppeltes Widerstandskabel

2 Jahre Garantie Gerät- 1 Jahr Zubehör.
Hergestellt nach den Normen ISO9001 - ISO14385 - KIWA 1984.



bloomea[®]
PARIS

Clap Tzu GmbH -
Bloomea
Marktplatz 5
26954 Nordenham

+49 (0) 177 36 16 085
bloomea@claptzu.de

Um mehr zu erfahren >>

